

IntegraMouse Air – mysz sterowana ustami

Szybki przewodnik

IntegraMouse® AIR
Szybki przewodnik

integramouse.com



Polski (PL)



Producent:
IntegraTools GmbH
Industriezeile 35A-4020 Linz
Austria
Tel.: +43 (0) 6608926366
e-mail: office@integratools.at
<https://www.integratools.at/>

Dystrybutor:
Altix Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 246C
03-152 Warszawa
Tel: 22 510 10 90

<https://www.altix.pl/>

Serwis:
Altix Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 1/710 (piętro 7)
25-662 Kielce
e-mail: serwis@altix.pl

Spis treści

Montaż i uruchamianie IntegraMouse Air	3
Krótki przewodnik po konfiguracji połączenia bezprzewodowego.....	5
Zastosowanie IntegraMouse Air w warunkach klinicznych	8
Dezynfekcja za pomocą przecierania	8
Prawidłowe czyszczenie podzespołów	9
Czyszczenie ustnika i wymiana membrany	9
Częstotliwość czyszczenia i utylizacji ustnika i przycisków wargowych	9
Utylizacja membrany	9
Sterylizacja ustnika	10
Funkcje IntegraMouse Air	12

Montaż i uruchamianie IntegraMouse Air



1.
Włóż ustnik, zwracając uwagę na czop i prowadnicę.



2.
Naciśnij lekko i przekręć ustnik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



3.
Zamontuj IMAIR w systemie montażowym (gwint 1/4").



4.
Ustaw IMAIR według potrzeb.

1. Zamontuj ustnik wkładając trzpień prowadzący w szczelinę prowadzącą.
2. Naciśnij lekko i przekręć ustnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Zamontuj IntegraMouse Air w systemie montażowym (gwint 1/4").
4. Ustaw IntegraMouse Air w żądanej pozycji.

Na początek zalecamy korzystanie z połączenia przewodowego.



5. Podłącz kabel do portu USB-C znajdującego się z tyłu IntegraMouse Air.



6. Podłącz kabel USB do komputera (gniazdo USB-A).



7. Naciśnij krótko prawy przycisk wargowy, by włączyć IntegraMouse Air.



8. Wszystkie diody LED zaświecą się na chwilę, IntegraMouse Air skalibruje się automatycznie.



9. Lewa dioda LED zaświeci się, sygnalizując połączenie przewodowe, prawa dioda LED (M) zaświeci się, sygnalizując tryb myszy.



Nie należy dotykać ustnika podczas kalibracji.



Poniższe czynności wykonywane będą przez IntegraMouse Air automatycznie:

- Ładowanie wbudowanej baterii.
- Instalacja na komputerze IntegraMouse Air jako domyślnej myszy.

Krótki przewódnik po konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Parowanie urządzenia odbywa się przez Bluetooth.



By używać myszy IntegraMouse Air z Bluetooth, sprawdź czy bateria jest naładowana w wystarczającym stopniu. Użyj dołączonej ładowarki, by naładować baterię przed pierwszym użyciem.



1. Naciśnij krótko prawy przycisk wargowy, by włączyć IntegraMouse Air.



2. Wszystkie diody LED zaświecą się przez chwilę, IntegraMouse Air będzie się kalibrować.



3. Lewa dioda LED będzie świecić.



4. Naciśnij lewy przycisk wargowy i przytrzymaj przez 3 sekundy.



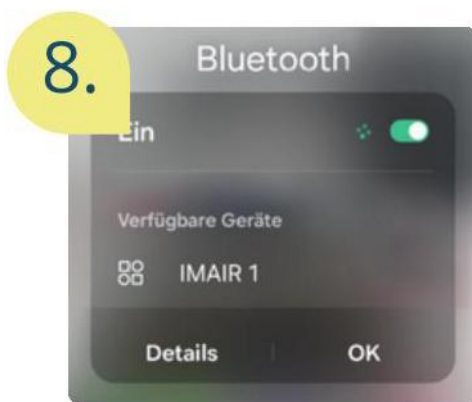
5. Dioda LED 1 zacznie migać na pomarańczowo.



6. Wybierz żadaną pozycję (1, 2 lub 3), naciskając lewy przycisk wargowy. Pozycję sygnalizuje świecenie odpowiedniej diody LED. Na zdjęciu jest to dioda 2.



7. Poczekaj chwilę, aż wybrana dioda LED zacznie migać na niebiesko. Na zdjęciu jest to dioda 2.



8. Rozpocznij wyszukiwanie urządzenia na urządzeniu końcowym, a więc na komputerze lub urządzeniu mobilnym, i wybierz „IntegraMouse Air”.



9. Jeśli parowanie zakończy się powodzeniem, miganie ustanie, a dioda LED zaświeci się na pomarańczowo.

Zastosowanie IntegraMouse Air w warunkach klinicznych

- W warunkach klinicznych ustnik, wraz z membraną i silikonową nakładką, a także przyciski wargowe należy traktować jako produkty jednorazowego użytku.
- Częstotliwość wymiany ustnika, w tym membrany i nakładki silikonowej, a także przycisków wargowych ustala wykwalifikowany personel lub lekarz.
- Jeśli podejrzewasz u użytkownika chorobę zakaźną, podejmij dodatkowe środki ostrożności, np. włóż rękawiczki podczas zmiany ustnika.

Dezynfekcja za pomocą przecierania

- Należy używać wyłącznie środków dezynfekujących przeznaczonych do powierzchni poliwęglanowych LEXAN.

- Polecamy następujące produkty firmy Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozyd Sensitive Liquid, Mikrozyd Sensitive Wipes lub odpowiadające im preparaty.



Nie należy stosować sterylizacji na mokro ani sterylizacji promieniami gamma. Przycisków wargowych i innych podzespołów IntegraMouse Air nie wolno czyścić sterylizując je na mokro czy też promieniami gamma.



Nie używaj silnych środków czyszczących. Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących, mogą one uszkodzić powierzchnie podzespołów.



Nie zanurzaj IntegraMouse Air w wodzie. Nigdy nie zanurzaj IntegraMouse Air ani jej podzespołów elektronicznych w wodzie i nie czyść ich pod bieżącą wodą. Może to spowodować trwałe uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

Prawidłowe czyszczenie podzespołów

- Przetrzyj delikatnie zasilacz IntegraMouse Air wraz z przewodem, a także system montażowy, wilgotną, niepozostawiającą włókien ściereczką, nasączoną środkiem dezynfekującym.
- Czyść komponenty co najmniej raz na dwa tygodnie.

Czyszczenie ustnika i wymiana membrany

Częstotliwość czyszczenia i utylizacji ustnika i przycisków wargowych



Czyszczenie: Mysz IntegraMouse Air ma funkcję przypominania o czyszczeniu. Po upływie zalecanego czasu użytkowania przypomina o tym za pomocą migającej diody LED. Czyszczenie ustnika i przycisków wargowych powinno się wykonywać:

- co najmniej raz na dwa tygodnie,
- częściej, w przypadku zakaźnej choroby użytkownika.



Utylizacja: Ustnik, przyciski wargowe i membrana IntegraMouse Air podlegają utylizacji:

- w przypadku uszkodzeń lub oznak zużycia,
- najpóźniej po sześciu miesiącach.

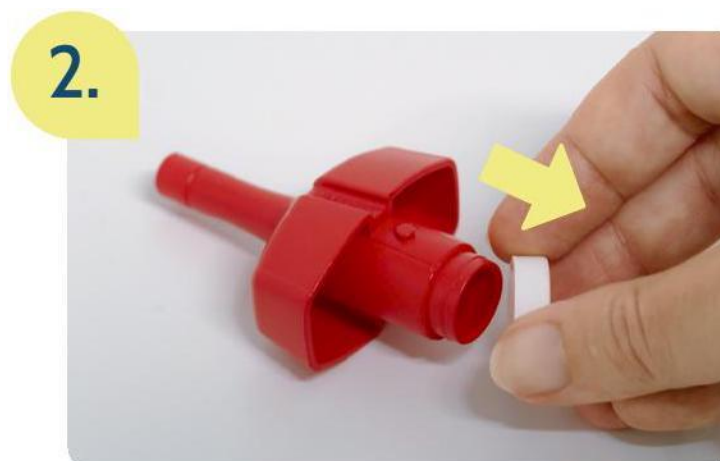
Utylizacja membrany

Membrana powinna być utylizowana w przypadku zużycia. Jej czyszczenie jest stanowczo odradzane.

Sterylizacja ustnika



1. Najpierw przekręć ustnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie pociągnij go ku sobie, na wprost.



2. Wyjmij membranę i wyrzuć ją, stosując się do obowiązujących zasad utylizacji tego typu elementów.



3. Dezynfekuj ustnik w sterylizatorze parowym.



4. Wyszusz ustnik i pozostaw go do ostygnięcia do temperatury pokojowej.



5. Załóż nową membranę na ustnik.



6. Zamontuj ustnik wkładając trzpień prowadzący w szczelinę prowadzącą i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, lekko naciskając.



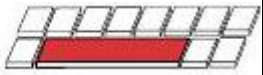
Ustnik można również dezynfekować w garnku z wrzącą wodą.

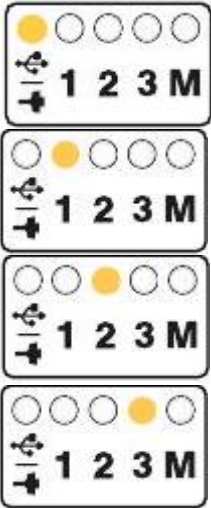
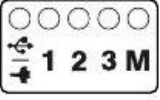
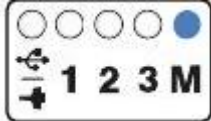
- Doprowadź wodę do wrzenia.
- Umieść ustnik w garnku za pomocą łyżki, sprawdzając czy jest całkowicie zanurzony w wodzie.
- Pozostaw we wrzącej wodzie przez co najmniej 5 minut.
- Ostrożnie wyjmij ustnik z garnka za pomocą łyżki.
- Wysusz ustnik i pozostaw go do ostygnięcia do temperatury pokojowej.

Funkcje IntegraMouse Air

IntegraMouse Air oferuje 3 tryby pracy, trybem standardowym jest tryb myszy.

	Mysz	Klawiatura	Gamepad
Przesuwanie ustnika w górę, w dół, w lewo, w prawo			

Ssanie	Kliknięcie lewym przyciskiem 	 Klawisz Spacji	Przycisk 1 
Dmuchanie	Kliknięcie prawym przyciskiem 	 Klawisz Enter	Przycisk 2 
Mikrofon		Uwaga: Mikrofon znajduje się na spodzie urządzenia. Można go używać tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone przewodowo.	
W celu kalibracji naciśnij prawy przycisk wargowy i przytrzymaj go przez 3 sekundy		Wszystkie diody LED migają jednocześnie.  Nie dotykać ustnika. 	

By zmienić urządzenie zewnętrzne naciśnij krótko lewy przycisk wargowy		1 połączenie z urządzeniem za pomocą kabla, 3 połączenia z urządzeniami Bluetooth 	
By zmienić tryb naciśnij krótko prawy przycisk wargowy	 Mysz	 Klawiatura	 Gamepad
Przypomnienie o wymianie ustnika		Dioda LED (pierwsza od lewej) miga na pomarańczowo. By zresetować timer, naciśnij oba przyciski wargowe jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy.	
Ostrzeżenie o niskim stanie baterii		Gdy w trybie bezprzewodowym poziom naładowania baterii jest niski, diody LED 1, 2 lub 3 zaczną migać na pomarańczowo.	
By wyłączyć IntegraMouse Air naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk wargowy przez 6 sekund	Uwaga: IntegraMouse Air musi być aktywna (dioda LED świeci). Naciśnij i przytrzymaj, aż wszystkie diody LED zgasną.		

By uzyskać dostęp do dalszych ustawień i funkcji, pobierz bezpłatną aplikację konfiguracyjną ze strony internetowej IntegraMouse pod adresem

www.integramouse.com. Znajdziesz tam dodatkowe przydatne informacje i opcje konfiguracji.